

Polyoftalmica
strumenti per l'oftalmologia



SHIN-NIPPON

IL SOFFIO LEGGERO
COME UNA PIUMA

TONOMETRO A SOFFIO NCT-200

IN SINTESI



- Tecnologia S.P.C. di controllo dell'intensità del soffio in base alla pressione dell'occhio.
- Monitor touch screen a colori reclinabile verticalmente, per misure sia in piedi che seduti.
- Allineamento e messa fuoco facile e veloce, grazie al riconoscimento automatico dell'apice corneale.
- Monitor orientabile orizzontalmente per avere accesso al capo del paziente senza perdere visuale sul monitor.

FUNZIONALITÀ

- Acquisizione in automatico o manuale con visualizzazione delle ultime 3 misurazioni con media.
- Funzione di correzione pachimetrica.
- Stampa personalizzabile con dati studio.
- Range misurazioni automatico, non è necessario cambiare il range nelle impostazioni per le pressioni più elevate.

SICUREZZA

- Indici di affidabilità dell'esame anche nella stampa
- Le misure non affidabili oppure che si discostano troppo sono visualizzate ma non considerate nella media finale.
- Allarme acustico, a monitor e blocco meccanico per evitare di urtare l'occhio dell'esaminato.

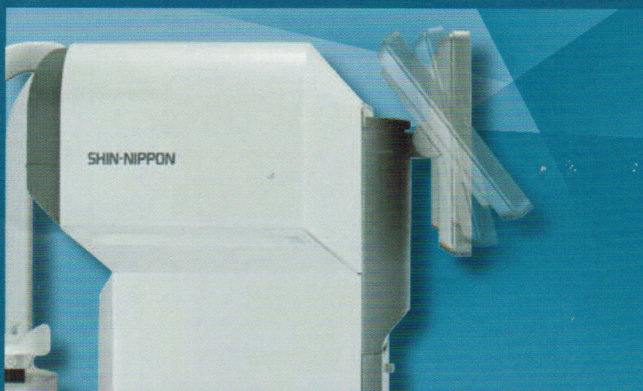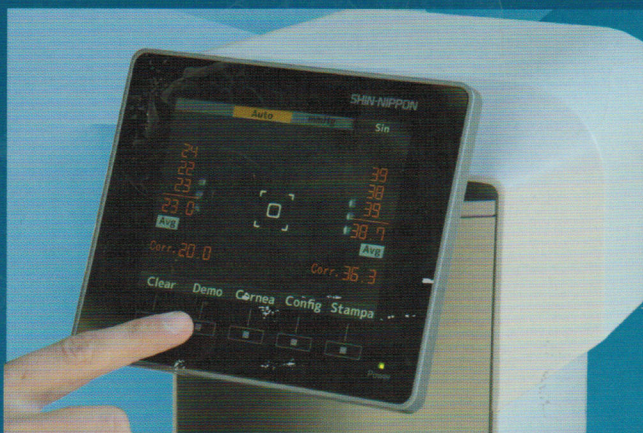

CARATTERISTICHE TECNICHE

RANGE DI MISURA	0-60 mmHg / 0.1-8.0 kPa
PRECISIONE	1mmHg/0.1kPa
STEP DI MISURA	1 mmHg - 0.1 kPa
DISTANZA DI LAVORO	11 mm
MIRA DI FISSAZIONE	Mira verde fissa o lampeggiante
METODO MISURA	Automatico, Manuale
MONITOR	Display LCD a colori da 5.7"
STAMPANTE	Termica integrata
DIMENSIONI	L 240 mm P 422 mm A 430 mm
PESO	13 Kg
RANGE MENTONIERA	+/- 30mm
INTERFACCIA	RS-232



Design e specifiche tecniche degli strumenti possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

Referente di Zona:



Polyoftalmica

Via Albert Bruce Sabin, 5/C - Parma
Tel. 0521.642126 - Fax 0521.643941
info@polynew.it - www.polynew.it